

HEMOFILIA A



TriniCHROM™ FVIII:C

Ensaio Cromogênico para dosagem do Fator VIII


Entregamos os melhores ensaios para os
laboratórios entregarem os melhores resultados




TriniCHROM™ FVIII:C (Cat. Nr. T2608)

Solução Stago para determinação cromogênica do Fator VIII

Com a chegada ao mercado de novas terapias de FVIII de ação prolongada, tornou-se necessário o desenvolvimento de novos métodos para a determinação quantitativa do FVIII no plasma humano, especialmente o ensaio cromogênico. [3,4]

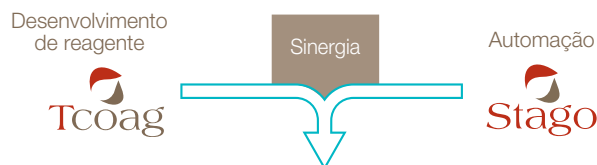


Aplicação sugerida* nas linhas de STA Compact Max®, STA-R®, STA R Max®

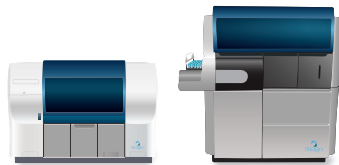

Apresentação do Kit



Princípio do teste

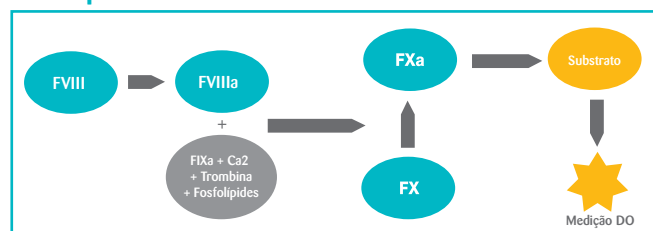

BIBLIOGRAFIA


- 1 - V. Proulle, Evaluation of a new chromogenic assay for Factor VIII activity measurement, GFHT 2016
- 2 - EMA, Workshop Report: Characterisation of New Clotting Factor Concentrates (FVIII, FIX) with Respect to Potency Assays Used for and Testing of Post Infusion Samples, 2014
- 3 - Pruthi, Rajiv K. "Laboratory Monitoring of New Hemostatic Agents for Hemophilia." Seminars in Hematology 53, no. 1 (January 2016): 28–34. doi:10.1053/j.seminhematol.2015.10.003.
- 4 - Kitchen, S., G. Kershaw, and S. Tiefenbacher. "Recombinant to Modified Factor VIII and Factor IX - Chromogenic and One-Stage Assays Issues." Haemophilia 22 (July 2016): 72–77. doi:10.1111/hae.13012.

* Registro ANVISA: 80102512198

Desempenho

- ▶ Faixa de trabalho estendida: [0.6 – 260 %] na linha STA-R®
- ▶ Correlação com a medição de coagulação de FVIII com STA®-ImmunoDef VIII / STA-C.K. Prest® (em pacientes não tratados)

FVIII cromogênico x FVIII coagulométrico (pacientes não tratados)^[1]

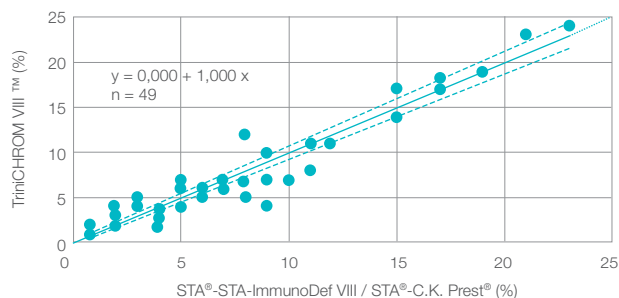

- ▶ O ensaio cromogênico é o método de escolha para o monitoramento clínico do tratamento de paciente conforme as recomendações da EMA^[2]

Fácil de usar

- ▶ Somente **uma** curva de calibração no intervalo de medição
- ▶ Robustez na calibração, não sendo necessária calibração sistemática
- ▶ Calibração com STA®-Unicalibrator (Cat. Nr. 00675)
- ▶ Controle de resultados com STA-System Control N + P (Cat. Nr. 00678)

Otimização de custo

Solução flexível e adequada a todas as práticas laboratoriais

- ▶ Otimização de reagentes, sem desperdício

Testes realizados por bateria Série de 27 a 32 testes	Uso do reagente fresco: frasco de 2 mL
Testes realizados sob demanda Série de 12 a 14 testes	Uso dos reagentes congelados: alíquotas de 500 µL
Testes realizados sob demanda Série de 12 a 14 testes	Uso dos reagentes congelados: alíquotas de 1 mL

Obs: tempo de descongelamento rápido de 5 a 10 minutos

Para maiores informações, entre em contato

Stago
BRASIL
No Coração da Hemostasia

Stago Brasil
Av. Eng. Luis Carlos Berrini, 105
Ed. Berrini One - 28º andar
São Paulo, SP - Brasil
04571-010
Tel. +55 11 4410-4600
info@br.stago.com
www.stago.com.br